

RADIC 8 Pojd'me se nadechnout!

Zaručte svým pacientům i zaměstnancům to nejbezpečnější pracovní prostředí během poskytování stomatologické péče.

Viruskiller VK401

Nízké provozní náklady

Velmi snadné uvedení do provozu

"Plug and Play"

Bez nutnosti složité instalace

Kompaktní, přenosný, **výkonný**

Nástěnná, nebo samostatně stojící varianta

Elegantní **bílá barva**, která nenaruší design Vaší ordinace

Vyčistí vzduch ve Vaší ordinaci během **pár minut**

Pro místnosti do **60 m²**


Neprodukuje nebezpečný **ozón**

Nastavení výkonu ventilátoru

pomocí **dálkového ovládání**




ZABÍJÍ AŽ 99,99%
VZDUŠNÝCH
PATOGENŮ
BĚHEM JEDNÉ
VÝMĚNY
VZDUCHU!

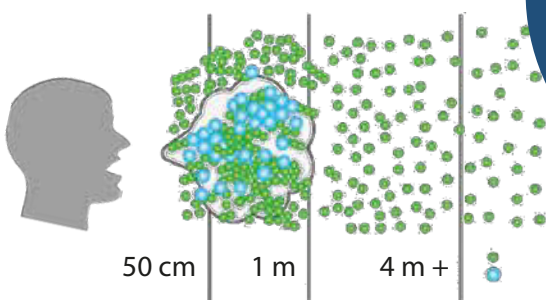


HENRY SCHEIN[®]
DENTAL

Před-filtr, HEPA filtr a filtr s aktivním uhlím

Vzduch je vtahován do přístroje, kde je mechanicky čištěn pomocí integrovaných filtrů a HEPA filtru. Jejich výměna je velmi jednoduchá.

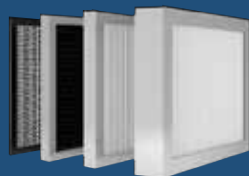

8x UV-C LAMPY + 40 TiO₂ Hexagon filtrů
= reaktorová komora

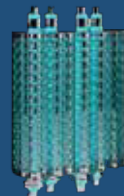

Patentovaná reaktorová komora s osmi UV-C lampami a filtračními trubicemi s povrchem TiO₂, vytváří smrtelné prostředí pro vzdušné a respirační viry včetně virů COVID, DENOVIRU, POLIOVIRU a viru chřipky. Životnost UV-C lamp je 8000 provozních hodin.

Malý pracant za přijatelnou cenu

SRSmedilux UV-C ničí všechny mikroorganismy ve vzduchu jako jsou bakterie, plísně, kvasinky a viry včetně koronaviru. Používá se k dezinfekci vnitřních prostor jako jsou lékárny, čekárny a ordinace.

SRSmedilux

Germicidní zářič **uzavřený**

Velmi nízká hlučnost < 20 db

Nízká spotřeba

Výkon UV-C zdroje 48 W

Průtok vzduchu 57 m³/hod

Určený pro provoz

za přítomnosti osob

Rozměr 600 x 150 x 70 mm



12 100 Kč

VYROBENO
NA
SLOVENSKU!

 HENRY SCHEIN®
DENTAL

Kontrola stavu a životnosti UV výbojky
Bezpečnostní pojistka - automatické vypnutí při otevření krytu
Univerzální a velmi jednoduchá montáž.
Možnost uchycení na stěnu či samostatně stojící varianta.

UV-C generátor:
Typ výbojky: 2x OSRAM Puritec L24W
Životnost výbojky: 8000 hodin